

PERFEXSCIENCES

Loupe Trinoculaire ZOOM Pro 10.56
réf : S0855Z6, ZOOM 8x à 50x



Le produit présenté par ce document est à tout moment susceptible d'évolution pouvant le modifier sur le plan de la technique interne, de l'aspect extérieur, des accessoires, de l'utilisation. Le présent document ne peut en aucun cas revêtir un caractère contractuel. Perfex Sciences 61 avenue de Toulouse, 31750 Escalquens Tél. : (33) 05 61 27 82 22 - Fax : (33) 05 61 27 82 37. email : info@perfex.fr - site : www.perfex.fr

PERFEXSCIENCES

Loupe Trinoculaire ZOOM Pro 10.56 réf : S0855Z6, ZOOM 8x à 50x



- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Oculaires | 7. Sortie trinoculaire |
| 2. Réglage dioptrique | 8. Système zoom |
| 3. Tête optique | 9. Colonne |
| 4. Vis de blocage de la tête optique | 10. Potence |
| 5. Objectif | 11. Molette de mise au point |
| 6. Platine porte objet | 12. Socle |

Caractéristiques :

- Tête trinoculaire orientable à 360°, visée à 45°, distance inter pupillaire ajustable 52-75mm, réglage dioptrique sur les deux oculaires.
- Système ZOOM ratio 1 : 6,25 (0.8x – 5x), grossissement continu de 8x à 50x, commandé par 2 molettes latérales.
- Oculaires grand champs 10X / 22mm.

Oculaire	Objectif Standard			Objectif additionnel			
				0.5X*		2.0X*	
	Objectif	Champ de vision mm	Distance de Travail mm	Champ de vision mm	Distance de Travail mm	Champ de vision mm	Distance de Travail mm
10X	0,8-5x	27,5-4	115	55-8,8	211	13,8-2,2	43,5
15X*	0,8-5x	20-3,2	115	40-6,4	211	10-1,6	43,5
20X*	0,8-5x	15,6-2,5	115	31,2-5	211	7,8-1,3	43,5

* Equipement en option

A – Installation de la loupe :

Pour une observation confortable il est souhaitable de placer votre loupe sur une table et de régler la hauteur du siège pour que les yeux arrivent juste au-dessus des oculaires. Évitez de placer votre loupe en plein soleil si vous utilisez la lumière comme source d'éclairage.

Fixer la potence (10 sur le schéma ci-dessus) sur le pied de la loupe, à l'aide de la plus grosse des clés Allen présentes derrière le pied (photo ci-contre).

Il existe, sur cette loupe, deux emplacements possibles pour fixer la potence sur le pied (photo de gauche ci-dessous) selon la distance de travail que vous désirez. Vous pouvez également utiliser la potence dans les deux sens (photos ci-dessous) pour augmenter ou diminuer cette distance de travail.



Une fois cette étape réalisée vous pouvez installer la tête optique sur la potence, choisir l'orientation et serrer la vis de blocage de la tête (photo ci-dessous).



Une fois la tête optique installée vous pouvez retirer les caches présents au niveau des tubes optiques (photo de gauche ci-dessous) et insérer à cet endroit les oculaires (photo de droite ci-dessous). N'hésitez pas à forcer un peu pour les rentrer correctement dans leur emplacement (mais attention au réglage dioptrique, cf paragraphe B).



Loupe Trinoculaire ZOOM Pro 10.56
réf : S0855Z6, ZOOM 8x à 50x

Pour une observation plus confortable, installez les bonnettes fournies avec la loupe en retirant les joints en caoutchouc présents sur les oculaires (photo de gauche ci-dessous) et en insérant à leur place, dans la rainure prévue à cet effet, les bonnettes (photo de droite ci-dessous).



Votre loupe ne possédant pas d'éclairage, nous vous proposons de placer un éclairage LED annulaire (72 diodes, lumière froide) (réf : SLED720). Cet anneau vient se placer autour de la partie inférieure de la tête optique (autour de l'objectif) (photo de gauche ci-dessous) et ce sont les trois vis présentes sur l'anneau qui le rendent solidaire de la tête optique (photo de droite ci-dessous).



B – Mise au point :

Pour les observations, placez vos yeux près des oculaires de la loupe, réglez l'écartement pupillaire des oculaires (en écartant ou en rapprochant les deux tubes optiques), de manière à obtenir un seul cercle dans le champ. Placez le spécimen sur la platine porte objet.


Commencez au grossissement le plus fort. Positionnez la molette du zoom (photo ci-contre) au plus fort grossissement et effectuez la mise au point précise en actionnant la molette de mise au point (photo de gauche ci-dessous) jusqu'à l'obtention d'une image nette. Ainsi, la mise au point reste correcte pour les autres grossissements, quand vous actionnez le zoom vers les faibles grossissements.

Pour adapter la mise au point à votre vue vous pouvez réaliser ce que l'on appelle le réglage dioptrique. Il vous faut, pour cela, fermer un des deux yeux, modifier la mise au point si elle n'est pas nette pour cet œil. Ensuite vous changez d'œil et vissez ou dévissez la bague de réglage de l'oculaire (photo de droite ci-dessous), ce qui aura un effet sur la netteté de l'image et adaptera la mise au point à votre propre vue.





Si vous souhaitez obtenir des grossissements plus forts ou plus faibles nous vous proposons d'ajouter sur votre loupe des objectifs additionnels adaptés. Retirez la tête optique et placez le réhausseur de tête optique comme indiqué sur la photo ci-contre. Vissez l'objectif additionnel au niveau de la partie inférieure de la tête optique (photo de gauche ci-dessous). Placez ensuite la tête optique sur le réhausseur (photo de droite ci-dessous) et serrez la vis du réhausseur qui permet de maintenir la tête optique.

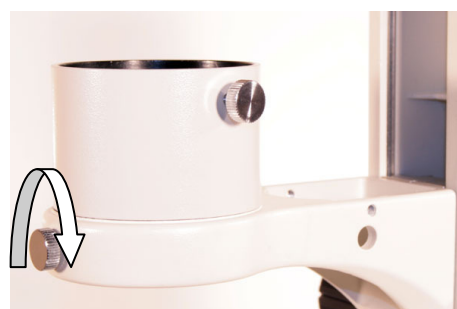

Vous pouvez également régler la tension des molettes de mise au point, c'est-à-dire faire en sorte que les molettes soient plus difficile ou plus facile à tourner. Il vous suffit de bloquer une des deux molettes et de tourner l'autre (photo ci-dessous).



C – Retirer la platine et les oculaires :

Pour retirer la platine porte objet vous devez dévisser, sans la retirer, la vis de la platine à l'aide de la petite clé Allen située au dos de la loupe (photo ci-dessous).



Pour retirer les oculaires (pour adapter une caméra par exemple) il faut être prudent afin de ne pas endommager le réglage dioptrique. Dévissez au maximum le réglage dioptrique (faites venir l'oculaire vers vous) et retirez l'oculaire en le tenant par la base et non par la bague de réglage dioptrique comme indiqué sur la photo ci-dessous.

Ne pas saisir
l'oculaire par cette
partie pour le retirer,
mais le prendre à la
base



D - la sortie trinoculaire :

Avec cette version trinoculaire du stéréomicroscope vous pouvez observer la préparation et simultanément effectuer un cliché photographique ou une vidéo. Pour utiliser cette sortie trinoculaire il vous faut sortir le capuchon (photo ci-contre) et visser à sa place l'adaptateur optique monture C (photo ci-dessous).



Adaptateur
optique monture C



E – Adaptation de la caméra numérique couleur CAMIRIS (réf : SC1465L) :

Selon le modèle de caméra que vous avez choisi vous aurez besoin ou non d'un réducteur de diamètre ou d'un adaptateur vidéo. Dans le cas le plus simple (sans réducteur de diamètre) la caméra s'insère directement dans la sortie trinoculaire. Sinon le réducteur de diamètre se place entre la sortie trinoculaire et la caméra. Camiris est une caméra à monture C donc elle se visse directement sur l'adaptateur optique monture C (cf paragraphe D pour le montage) de la sortie trinoculaire comme indiqué sur les photos ci-dessous.



ASTUCE : souvent il arrive que la netteté de l'image ne soit pas la même entre la caméra ou l'appareil photo et ce que vous observez directement aux oculaires. Pour avoir la même mise au point lorsque vous passez de la caméra ou de l'appareil photo aux oculaires vous pouvez jouer sur le réglage dioptrique (cf paragraphe B) des oculaires.

F - Entretien :

Pour une utilisation prolongée de votre loupe trinoculaire nous vous conseillons d'observer les points suivants:

- Ne pas stocker la loupe dans un local humide ou avec des produits corrosifs afin d'éviter que les parties métalliques s'oxydent ou que les parties optiques se piquent.
- Protégez la loupe avec sa housse ou la remettre dans son emballage d'origine après utilisation.
- Quand vous prenez la loupe, manipulez-la par la colonne du support.
- Ne pas toucher les parties optiques des oculaires ou des objectifs avec les doigts. Si les parties optiques ont besoin d'être nettoyées, utilisez un kit spécial pour objectif photo (Kit CAMGLOSS pour nettoyage optique Réf : PCAMG00) ou un chiffon doux imbibé d'un mélange alcool – éther 70% / 30%.
- La poussière peut être enlevée avec un pinceau ou un petit soufflet.